


Ulike

Depilátor Ulike Air IPL UI04

Uživatelská příručka

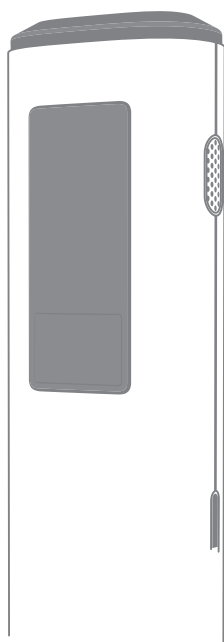

Air

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.

Pro snadné používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na vhodném místě. Fotografie v této příručce jsou pouze ilustrační.

Bezpečnostní opatření

Zvláštní upozornění

- Před použitím nepoužívejte žádné gely nebo pečující přípravky (gel z aloe vera apod.).
- Nezapomeňte výrobek sestavit a používat v souladu s ustanoveními v návodu k obsluze.
- Přečtěte si pozorně návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

 **NEBEZPEČÍ:** Obsah související s poraněním osob způsobeným nesprávnou manipulací

 **VAROVÁNÍ:** Obsah související s nesprávnou obsluhou

 **UPOZORNĚNÍ:** Obsah týkající se osobní bezpečnosti nebo poškození majetku v důsledku nesprávné obsluhy.

Nebezpečí



- Nepoužívejte přístroj přímo u očí, jinak může silný zdroj světla vyzařovaný výrobkem způsobit poškození očí.

- Za normálních provozních podmínek nenasazujte přímo boční zásuvku, jinak může teplota způsobit popálení kůže.

- Za normálních provozních podmínek nekládejte do výrobku žádné předměty, jinak může teplota způsobit poškození lidského těla.

- V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o použití u dětí mladších 15 let, proto se děti mladší 15 let nesmí tohoto zařízení dotýkat ani jej používat. Při používání výrobku jej držte mimo dosah dětí mladších 15 let.

Upozornění:

- Při nedodržení pokynů se mohou vyskytnout nežádoucí účinky.

- Nepoužívejte antiperspirant bezprostředně po ozařování podpaží.

- Abyste předešli popáleninám a poruchám během používání, pravidelně kontrolujte a čistěte nečistoty ozařovacího otvoru.

- Ozařovací port neumísťujte do blízkosti předmětů, které se snadno odmagnetují, jinak může dojít k poruše a poškození.

- Nepoužívejte výrobek, pokud je ventilační otvor zablokován, jinak může dojít ke vzniku kouře a požáru.
- Pro zajištění správné funkce výrobku nesměřujte vyzařovací otvor směrem k černým předmětům.
- Abyste zabránili zčernání, změně barvy a popraskání, neozáříte oblečení, vlasy ani jiné předměty.
- Nepoužívejte výrobek na domácí zvířata, jinak může dojít k poranění.
- Při nedodržení pokynů může výrobek způsobit poškození očí (případně oslepnutí) nebo kůže. Přečtěte si prosím návod k použití a dodržujte jej.
- Neprodlužujte používání a nepoužívejte výrobek opakovaně na stejném povrchu těla, vyhněte se nadměrnému používání, včetně nadměrných pulzů a/nebo nadměrné frekvence, které mohou způsobit poškození pokožky.
- Nesprávné použití může způsobit poškození očí, chraňte si je. Nepoužívejte výrobek nad očními víčky nebo v blízkosti očí.
- Neignorujte bezpečnostní mechanismy vlastní výrobku, například správné nošení ochranných brýlí, správné přilnutí k pokožce atd.
- Před použitím proveďte kožní test a po dvouhodinovém testu zkontrolujte stav pokožky. Výrobek můžete používat, pokud se v ozařované oblasti nevyskytují žádné abnormality (zarudnutí nebo puchýře).
- Při použití si nasadte ochranné brýle a epilační okénko umístěte do blízkosti pokožky pro postup epilace.
- Po použití prosím setřete chloupky a přípravky pro péči o pokožku, které jsou součástí epilátoru, aby nedošlo k poruše funkce a poškození pokožky.
- Při používání výrobku postupujte podle pokynů, správně nasadte brýle a vyhněte se silné světelné stimulaci.
- Nastavte prosím intenzitu ozařování podle stavu vaší pokožky a ujistěte se, že přístroj poprvé používáte od úrovně 1.
- Pokud je vaše pokožka po použití mírně horká a zarudlá, je to normální.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru a po použití jej na určitou dobu vypněte.
- Očistěte pokožku, abyste se ujistili, že na ní nejsou žádné zbytky chloupků, je zcela suchá a bez mastných látek a skvrn.
- Pokud je teplotní rozdíl pracovního prostředí větší než 20 stupňů (z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo naopak), vypněte přístroj a před dalším použitím počkejte přibližně 2 hodiny.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných předmětů (včetně sprejů, čerpacích stanic apod.), které mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem a další nebezpečí.
- Okolní teplota epilátoru je 0-45 °C. Před použitím zkontrolujte místnost.
- Během 24 hodin po epilaci se vyhněte přímému ultrafialovému záření na ozařované části těla.

- Nevystavujte výrobek slunečnímu záření ani jej dlouhodobě nevystavujte ultrafialovému světlu, protože by došlo k jeho vážnému poškození.
- Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí napájení nefunguje (není slyšet žádný zvuk), nepoužívejte jej, jinak může způsobit poruchy, jako je kouř, požár atd.
- Nepoužívejte výrobek ve vaně, sprše nebo na jiných místech v blízkosti zdroje vody.
- Výrobek a napájecí adaptér skladujte na suchém místě.
- Při používání výrobku se nedoporučuje jeho dlouhodobé používání. Po 1 hodině používání jej na 10 minut vypněte.
- Pokud dojde k poškození krytu, objektivu nebo napájecího adaptéru, okamžitě přestaňte výrobek používat. Výrobek neopravujte bez autorizace. Opravu musí provést servisní středisko.



Nevhodné situace

- Použití výrobku může způsobit nepříjemné nebo nežádoucí účinky u alergiků, osob s kožními chorobami a alergickou dermatitidou, osob s citlivou pokožkou apod. Pokud se při používání přípravku objeví nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte přípravek používat.
- Přípravek nepoužívejte na místa s narušenou integritou kůže (např. popáleniny, puchýře, řezné rány, poranění, aktivní kožní onemocnění nebo infekce).
- Pokud užíváte fotosenzitivní léky jako součást důležitých terapií, je před použitím výrobku nutná lékařská konzultace, jinak může použití výrobku způsobit poškození kůže.
- Výrobek nesmí používat těhotné ženy, kojící ženy, ženy v menstruaci, osoby s jizvami na těle, diabetem, jemnou a na světlo citlivou pokožkou.
- Výrobek nesmí používat osoby s těžkým srdečním onemocněním, středně těžkou až těžkou hypertenzí, zhoubnými nádory, folikulitidou, infekčními kožními chorobami, popálenou kůží a poruchami antikoagulace.
- Přípravek nepoužívejte, pokud trpíte poruchou metabolismu kolagenu, včetně toho, že jste v minulosti měli jizvy a špatně se hojily rány.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je vaše pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážkám nebo alergiím.
- Nepoužívejte přípravek, pokud je ozařované místo infikované, máte herpes simplex, kožní léze a hematomy, onemocnění související s imunitní reakcí (včetně HIV, lupus erythematoses, porfyrie atd.), poruchy krvácení. Nepoužívejte tento přípravek, pokud používáte isotretinoin, kyselý ovocné kyseliny (AHA), kyselinu salicylovou (BHA) nebo kyselinu azalovou.

- Pokud jste v posledních 30 dnech používali chemickou epilaci, pokud jste v krátké době používali přípravky na bělení pokožky nebo pokud jste používali složky s vitamínem A, používejte tento výrobek s opatrností.
- Nepoužívejte přípravek současně s přípravky obsahujícími éterické oleje. Ujistěte se, že pokožka v ozařované oblasti je čistá a suchá, nepoužívejte pleťová mléka, mazadla ani jiné kosmetické přípravky.
- Pokud povrch pokožky není čistý a suchý, může to ovlivnit zážitek z používání výrobku a dokonce způsobit poškození pokožky.
- Je zakázáno používat výrobek při užívání aspirinových léků, užívání imunosupresiv, isotretinoinu a dalších léků. Je zakázáno používat výrobek při užívání léků citlivých na světlo (např. tetracyklin a sulfa).
- Je zakázáno používat přípravek osobám, které si v nedávné době aplikovaly injekce s výplněmi a toxiny.

Výrobek nepoužívejte na následujících částech těla nebo za následujících podmínek:

- V ústech, na genitáliích, na sliznicích apod.
- Na části těla po plastické operaci
- Kolem očí
- Na hlavě
- Na místa s akné
- na skvrnách a znaménkách
- na obočí
- na uších
- na bradavkách a v jejich okolí
- na pupku
- kolem velkých žil
- na tetování

Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající, pokud si nejste jisti, zda můžete tento výrobek používat, doporučujeme poradit se s lékařem.

Po použití tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

- Popáleniny kůže
- Lokální zarudnutí a otok
- Otok a puchýře vlasových folikulů
- Erytém a pigmentace
- Svědění a bolest
- Zjizvení

Poznámka: tento seznam není úplný; v případě dalších stavů se doporučuje konzultace s lékařem.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Výrobek by neměl být používán k léčbě zdravotních potíží.
2. Výrobek by neměl být používán k odstranění bílých nebo šedivých vlasů.
3. Pokud máte přirozeně tmavou pleť, nepoužívejte tento výrobek.
4. Před epilací se nevystavujte slunečnímu záření.
5. Při prvním použití výrobku začněte s úrovní 1 a vyberte si malou oblast na paži, abyste vyzkoušeli reakci své pokožky.
6. Při epilaci se prosím ujistěte, že je okénko epilátoru blízko pokožky, a poté jej přiložte na pokožku.
7. Nepoužívejte výrobek v tmavém prostředí.
8. Abyste předešli nesprávné funkci přístroje, nepoužívejte jej na přímém slunečním světle.
9. Nebijte do výrobku ani s ním prudce netřeste.
10. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky bez vypnutí, jinak může dojít k poškození výrobku.

Poznámka: Při používání epilátoru dbejte na to, aby přívod vzduchu směřoval nahoru a obrazovka LCD dolů, což podporuje lepší rozptýl tepla a chlazení epilátoru.

Úvodní informace o výrobku


O epilátoru

- Inovativní safírová technologie zmrazování pokožky, účinně chladí pokožku, snižuje její zahřívání, zabraňuje spálení a lépe chrání pokožku. Safírová hlava stlačuje pokožku a tlačí na vlasové folikuly tak, že jejich kořínky jsou blíže k oblastem s vyšší energií, čímž se zvyšuje účinnost absorpce energie vlasovými folikuly. Safírová hlava lampy se snadno čistí a má dobrou průhlednost pro lepší odstranění chloupků.


- Výrobek má 5 úrovní výkonu, které vyhovují různým citlivostem pokožky. Přístroj a napájecí zdroj lze oddělit, je kompaktní a přenosný, snadno se skladuje.

- Výrobek má integrovaný držák lampy, který není třeba vyměňovat, což zajišťuje dlouhou životnost a je vhodný pro mnoho oblastí odstraňování chloupků (např. obličej, rty, podpaží, linie bikin, paže, nohy atd.), abyste ušetřili nákladnou výměnu držáku lampy, nemusíte často kupovat příslušenství a nevznikají žádné skryté dodatečné náklady. Výrobek má navíc vynikající filtrační systém, který velmi dobře filtruje neúčinné, krátké a škodlivé vlny.


Obsah balení

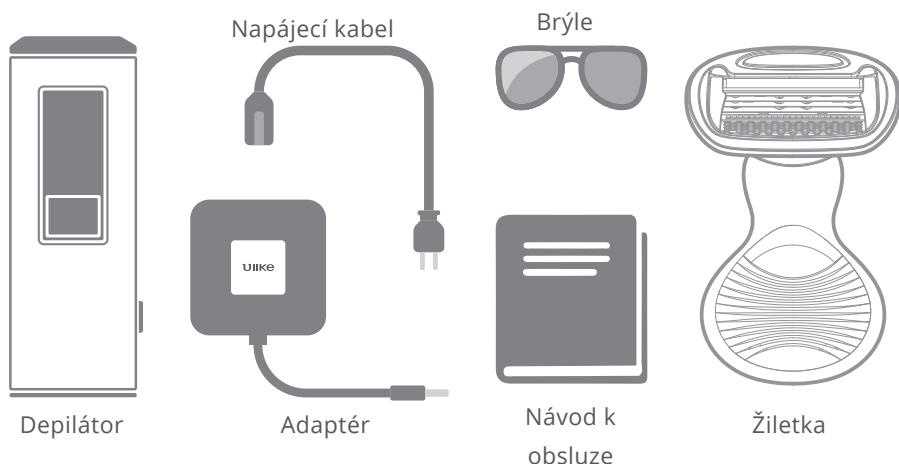


Popis produktu

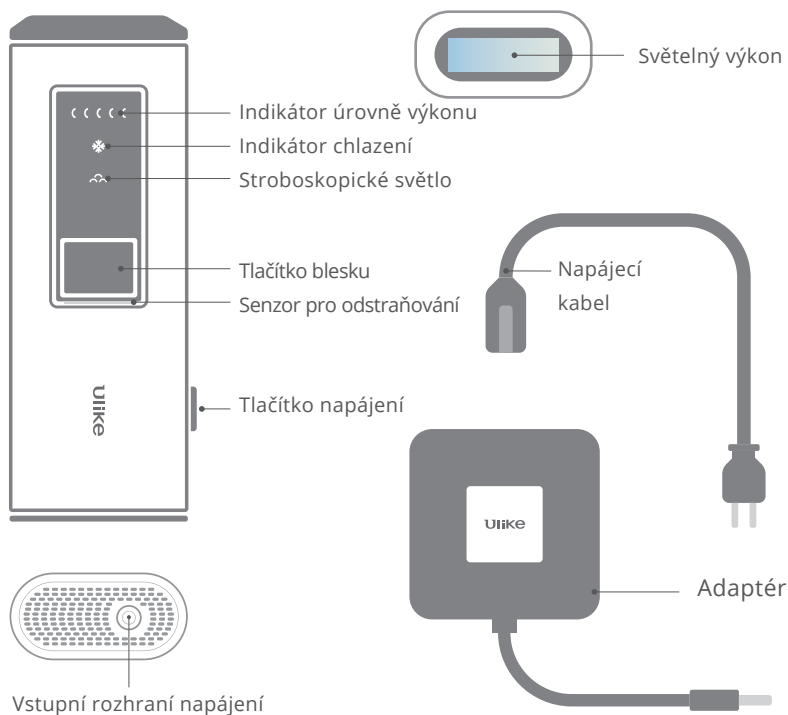


Příprava před použitím

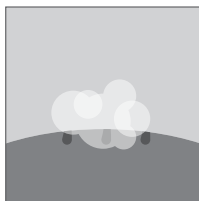

- Pokožku důkladně očistěte, aby byla bez chloupků, zcela suchá a bez mastných látek.

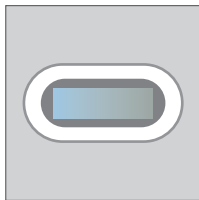

- Zkontrolujte, zda na ozařovacím portálu nejsou nečistoty, chloupky nebo jiné nečistoty a zda není poškozený nebo abnormální. Pokud jsou na něm nečistoty, odstraňte je, aby nedošlo ke znehodnocení výrobku a kožním problémům.

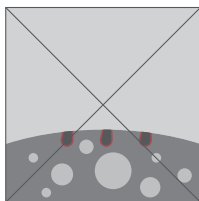

- Po dvouhodinovém kožním testu zkontrolujte stav pokožky. Pokud se na ozařovaném místě nevyskytují žádné abnormality (zarudnutí, puchýře), je použití tohoto výrobku bezpečné. Nezačínajte s odstraňováním chloupků, dokud není ukončen test ozáření pokožky.

Nastavení intenzity ozařování

Výrobek má pět stupňů výkonu pro různé citlivosti pokožky a barvy vlasů.

Doporučené pokyny jsou uvedeny níže:


- V tabulce níže si prosím vyberte úroveň vhodnou pro vaši plet' a barvu vlasů.

Barva pleti \ Barva vlasů						
	Bílá	Beige	Bright hnědá	Střední hnědá	Dark hnědá	Hnědá a tmavší
Šedá/šedá	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Červená	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Světlá blond	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Tmavá blond	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NE	NE
Hnědá	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NE	NE
Tmavě hnědá	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NE	NE
Černá	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NE	NE

Upozornění: NO znamená předmět, nikoliv použití.


- Pokud během používání pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, snižte prosím úroveň výkonu (pokud cítíte teplo nebo mírné pálení bez bolesti, je to normální).
- Lidé s tmavou pletí jsou náchylní ke kožním alergiím, proto je vhodné používat nižší úroveň.
- Pro osoby s hustými vlasy je vhodné použít vyšší úroveň (4 nebo 5). Pro osoby s malými vlasy je určena nižší úroveň (1, 2 nebo 3). Konkrétní situace se u jednotlivých osob liší, ale pro první použití použijte výrobek na úrovni 1.

Používání

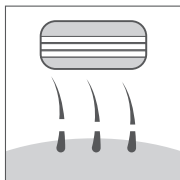


Krok 1

Chlupy, které je třeba upravit, oholte žiletkou.

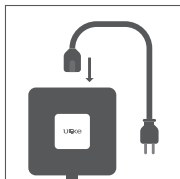


Krok 2

Připojte napájecí kabel k adaptéru.

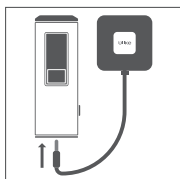


Krok 3

Připojte napájecí kabel ke vstupnímu konektoru na zadní straně výrobku.

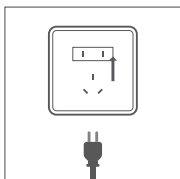


Krok 4

Po připojení napájecího kabelu ke vstupnímu konektoru výrobku zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

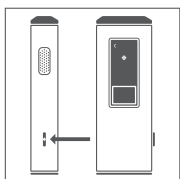


Krok 5

Stiskněte tlačítko napájení na boční straně výrobku a po zapnutí se zobrazí úroveň výkonu a chlazení.

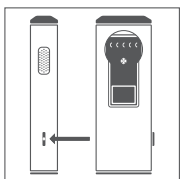


Krok 6

Stiskněte tlačítko nastavení výkonu/úrovně. Výrobek má pět úrovní výkonu. Nastavte požadovanou úroveň, čím vyšší výkon, tím rychlejší účinek. Doporučuje se začít poprvé s úrovní 1 a postupně můžete tuto úroveň zvyšovat, abyste dosáhli požadovaného účinku.

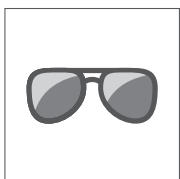


Krok 7

Před holením chloupků si nasadte ochranné brýle, abyste si chránili oči.

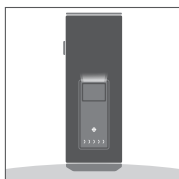

Krok 8

Umístěte světelný výstup na ošetřovanou pokožku a přiložte jej ve svislé poloze. Rozsvítí se kontrolka senzoru pro odstraňování chloupků, která signalizuje, že je zařízení v plném kontaktu. Stisknutím tlačítka blesku zahájíte operaci odstraňování chloupků. Pokud se bílé světlo nerozsvítí, znamená to, že hlavice lampy nepřiléhá správně k pokožce a zařízení nevydává světlo.

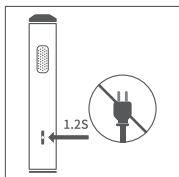

Krok 9


Po dokončení epilace stiskněte a podržte po dobu 2 s tlačítko napájení, abyste přístroj vypnuli (nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, aniž byste přístroj vypnuli, aby nedošlo k jeho poškození).

Úvod do režimů

- Kontinuální režim (pro velké plochy, např. paže, nohy):


Výstup lampy umístěte na ošetřovanou oblast na kůži a zcela ji zarovnejte s kůží. V tomto okamžiku se rozsvítí kontrolka senzoru epilace, což znamená, že hlava lampy je v plném kontaktu s pokožkou. Podržte stisknuté tlačítko lampy a ihned začněte pomalu a rovnoměrně pohybovat zařízením po pokožce, přičemž udržíte přilnutí k pokožce, a v určitém intervalu se ozve zábleskové světlo. Během této doby udržíte epilátor v pohybu a pohybujte dvakrát dopředu a dozadu v oblasti, kde je požadováno odstranění chloupků.

Tip: Rychlost pohybu epilátoru lze upravit tak, aby odpovídala rychlosti záblesků a dosáhlo se rovnoměrnějšího pokrytí. Rychlost záblesku je rychlejší na první úrovni, pomalejší na druhé úrovni a čím vyšší úroveň, tím pomalejší je rychlost vysílání světla.

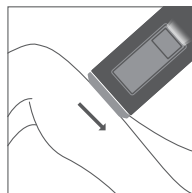

Jednoduchý režim (vhodný pro malé oblasti, jako jsou prsty a vousy):

Umístěte výstup lampy na ošetřovanou oblast na kůži a zcela ji zarovnejte s pokožkou. V tomto okamžiku se rozsvítí světlo senzoru pro odstraňování chloupků, což znamená, že hlava lampy je v plném kontaktu s pokožkou. Stisknutím tlačítka světla zahájíte odstraňování chloupků. Přesuňte hlavu lampy na další část pokožky, počkejte, až se rozsvítí bílé světlo lampy senzoru odstraňování chloupků, a poté stisknutím tlačítka světla zopakujte výše uvedenou operaci.

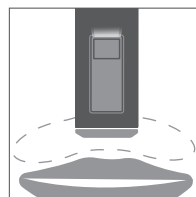


Tip: Pokud začne být pokožka kdykoli během epilace příliš horká, jednoduše ji na několik sekund přerušte a nechte světelný výstup vychladnout, než budete pokračovat v epilaci.

Tipy pro odstranění chloupků

1. Nepřetržitě vzplanutí epilátoru nepřetržitě vytváří teplo. Pro účinné udržení chladicího účinku se doporučuje použít hlavu safírové lampy k ochlazení okolí planoucí oblasti pokožky po dobu přibližně 30 s po epilaci a poté provést epilaci na další oblasti. Tím se pokožka zklidní a chlazení bude účinnější.

2. Pevně přitlačte hlavu lampy k pokožce, abyste zajistili, že hlava lampy bude v plném kontaktu s kořínkem vlasového folikulu a folikul bude absorbovat více energie, čímž dosáhnete lepšího výsledku epilace. Technologie chlazení pokožky účinně ochlazuje pokožku, snižuje její zahřívání a lépe ji chrání.

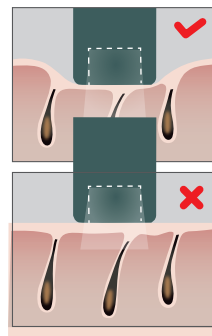

Cyklus používání

První 1-2 týdny používejte přípravek 3x týdně;

následujících 3-5 týdnů používejte přípravek 2krát týdně;

Po 5 týdnech používejte přípravek každých šest měsíců nebo jednou měsíčně.

Poznámka: Používejte výrobek podle růstu vašich vlasů. Pokud jsou vaše vlasy příliš husté, můžete odpovídajícím způsobem zvýšit úroveň výkonu a frekvenci. Konkrétní situace se u jednotlivých osob liší.

Péče po použití

Opatření po epilaci

- Doporučuje se vyhnout se kontaktu s vodou během 6 hodin po epilačním ošetření.
- Po depilaci nepoužívejte parfémy, masky ani kosmetiku. Po dobu 24 hodin po epilaci se vyhýbejte působení UV záření a v případě potřeby použijte opalovací krém.
- Opalování může způsobit ztmavnutí pokožky nebo spálení. Ozařování během této doby způsobí zarudnutí, otok a zánět. Proto při používání tohoto výrobku dbejte na to, abyste se nevystavovali slunci po dobu nejméně 1 týdne.
- Umělé opalování není během depilace povoleno.
- Pokud je po odstranění chloupků nutná plastická operace (pouze v oblasti odstranění chloupků), poraďte se se svým lékařem.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.

Čištění a údržba

Abyste zajistili nejlepší výsledky a co nejdelší životnost výrobku, čistěte výrobek před každou epilací a po ní, abyste zabránili dlouhodobému usazování chloupků a prachu. Pokud nebude výrobek řádně vyčištěn, nebude správně fungovat

- Před čištěním musí být přístroj vypnutý a odpojený od sítě.
- Měkkým, čistým a suchým hadříkem otřete a očistěte zrcadlový povrch světelné zásuvky.
- Přístroj skladujte v suchém, bezprašném prostředí při teplotě -10-60 °C.
- Výrobek a příslušenství nikdy nemyjte ve vodovodních kohoutcích nebo myčkách nádobí.
- K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky (zubní pastu apod.) ani žíravé kapaliny (benzín, motorový olej, aceton apod.).

Poznámka: Pokud voda nezajistí dobré vyčištění, lze k čištění výše uvedených částí použít několik kapek alkoholu o vysoké koncentraci (ne více než 96 %).

Často kladené otázky

V této části jsou popsány problémy, se kterými se můžete setkat při používání tohoto výrobku. Pokud se vám nepodaří vyřešit problémy, se kterými se setkáte, pomocí níže uvedených řešení, obraťte se na středisko služeb zákazníkům.

- Pokud dojde k neobvyklé situaci nebo se vám nepodaří závadu odstranit, obraťte se na servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Výrobek nelze zapnout.	Napájecí zdroj není připojen.	Zkontrolujte, zda je připojen napájecí zdroj.
Žádné vyzařování světla	Zbyt wysoka temperatura depilatora/niedostateczny nacisk głowicy na skórę	Před použitím nechte přístroj vychladnout. Držte epilátor u pokožky, dokud se nerozsvítí světelný indikátor.
Indikátor je vypnutý.	Nesprávný kontakt se zařízením	Zkontrolujte, zda napájecí zdroj správně funguje. Opravte nebo vyměňte výrobek.
Během záblesku je cítit nepříjemný zápach.	Filtr je znečištěný/zbytky vlasů na povrchu přístroje	Otřete filtr/vyčistěte vlasy
Nesnesitelná bolest při odstraňování	Žádné chloupky nebyly kvůli odstranění oholeny.	Před použitím tohoto přípravku oholte vlasy, které mají být ozařovány.
	Je zakázáno používat tento výrobek na místech, která nejsou určena k odstraňování chloupků.	Nepoužívejte tento přípravek na vnitřní stydke pysky, vaginu, konečník, bradavky nebo okolní oblasti. Muži nesmí tento výrobek používat na obličej nebo genitálie.
	Intenzita světla je příliš vysoká.	Snižte intenzitu světla.
	Poškozené okno propouštějící světlo.	Kontaktujte službu.
Po použití epilační místo zčervená.	Mírné zarudnutí je normální a pro tělo neškodné a brzy zmizí.	Ke zklidnění pokožky použijte gel z aloe vera nebo hlavu safírové lampy.
Neuspokojivý účinek odstraňování chloupků	Používáte příliš nízkou úroveň osvětlení.	Zvolte prosím vyšší úroveň.
	Chybějící blesk v oblasti depilace	Blesky musí být ve vzájemné blízkosti.
	Tento přístroj nemá žádný vliv na barvu vlasů.	Pokud jsou vlasy světle blond, šedé, červené nebo bílé, nebude expozice účinná.
	Nedostatečná frekvence používání tohoto zařízení	Pro účinné odstranění všech chloupků je třeba konzultovat doporučený režim ozařování.
	Reakce na vystavení světlu je pomalá.	Tento přípravek by se měl používat nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců.
Výrobek je během používání horký a vlhký.	Může být způsobeno dlouhodobým provozem zařízení.	Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyziky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.